

G-Pet Glucosemeter handleiding

1. Inleiding
2. Belangrijke veiligheidsvoorschriften
3. Over de gPet PLUS **veterinaire** glucosemeter (n.v.t)
4. Over de gPet PLUS Meter
5. Over het display van de gPet PLUS Meter
6. Over de gPet PLUS teststrip
7. Over de gPet PLUS teststripflacon
8. De batterij installeren/vervangen
9. De batterij vervangen
10. De gPet PLUS-meter instellen
11. Het jaar, de datum en de tijd instellen
12. De meter coderen
13. Het herinneringsalarm instellen
14. Het HI / LO alarm instellen
15. Belangrijke informatie
16. Bloedglucosetests
17. Een bloedmonster verkrijgen
18. Bloedmonster aanbrengen op de gPet PLUS teststrip
19. HI en LO metingen
20. Oplossing voor kwaliteitscontrole
21. Een kwaliteitscontroletest uitvoeren
22. Resultaten kwaliteitscontroleoplossing
23. Geheugenfuncties
24. Gemiddelde dagresultaten bekijken
25. De geheugenmodus verlaten
26. Procedure voor reiniging en desinfectie
27. Verzorging en opslag
28. Displayberichten
29. Foutmeldingen
30. Problemen oplossen
31. Specificaties
32. Meter Opslag
33. Beschrijving van pictogrammen
34. Service en garantie

1. Inleiding


De gPet PLUS veterinaire glucosemeter is een handbediende glucosemeter die speciaal is voor gebruik bij katten, honden en paarden. Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is om de glucosemeter te gebruiken en te onderhouden. Gelieve zorgvuldig te lezen voor gebruik.

2. Belangrijke veiligheidsinstructies

Alle onderdelen van de gPet PLUS veterinaire glucosemeter moeten worden beschouwd als potentieel besmettelijk en kunnen door bloed overgedragen ziekteverwekkers overbrengen. Om er zeker van te zijn dat het dier en de gebruiker geen risico lopen, moet u altijd onthouden:

- De teststrip en de priknaald zijn voor eenmalig gebruik.
- Alle onderdelen van de set worden beschouwd als biologisch gevaarlijk en kunnen mogelijk infectieziekten kunnen overdragen, zelfs na reiniging en desinfectie.

4. Over de gPet PLUS Meter

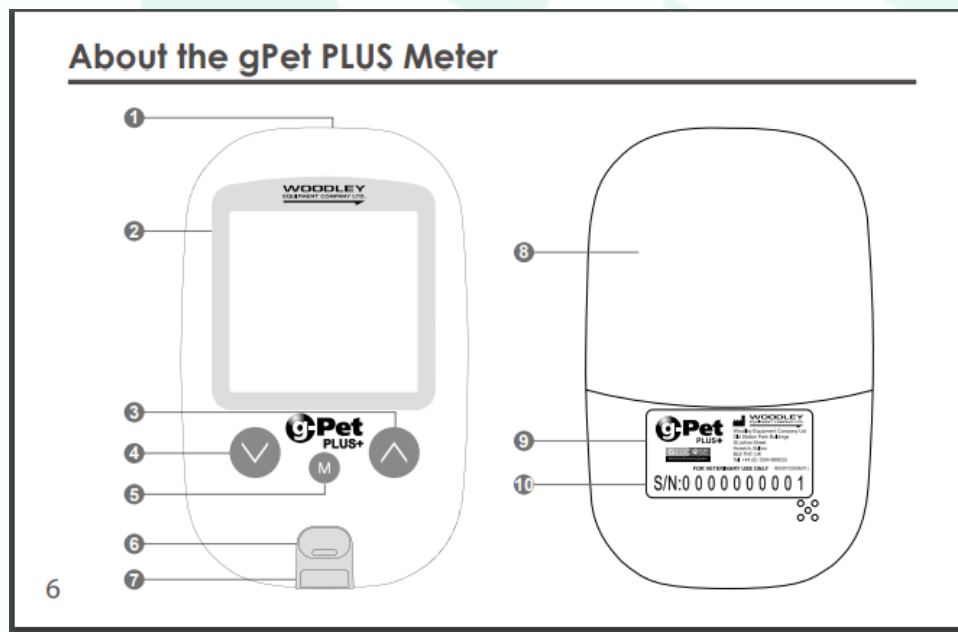


- 1.** Datapoort - Sluit de interfacekabel aan om gegevens over te dragen.
- 2.** Display - Hier worden de testresultaten weergegeven. Het grote, gemakkelijk af te lezen scherm leidt gebruikers door de test met behulp van cijfers en symbolen.
- 3.** (^) Knop - Druk op deze knop om het herinneringsalarm en het HI / LO alarm in te stellen. Verhoog het nummer en ga achteruit door de meterinstellingen.
- 4.** (v) Knop - Houd deze knop ingedrukt om vooruit te gaan door de meterinstellingen.

5. (M) Knop - Druk op deze knop om het jaar/de datum/de tijd in te stellen, om de resultaten en het test gemiddelde in het geheugen te bekijken en de meter uit te schakelen.
6. Strookuitwerpknop - Druk op deze knop om de teststrook uit te werpen.
7. Testpoort - gPet PLUS-teststrips en de codestrip worden hier in de gPet PLUS meter.
8. Batterijdeksel
9. Label - Informatie van de fabrikant.
10. Serienummer

5. Over het display van de G-Pet PLUS Meter

1. Geheugenpictogram. Geeft aan in geheugenmodus.
2. Datum
3. Kwaliteitscontrole oplossing test. Verschijnt bij het uitvoeren van een kwaliteitscontrole oplossing test en identificeert het resultaat als een kwaliteitscontrole test.
4. Pictogram alarmfunctie. Verschijnt wanneer de wekker is ingesteld.
5. Zone testresultaten. Toont testresultaten.
6. Geluid aan
7. Maaltijdindicator. Voor en na de maaltijd.

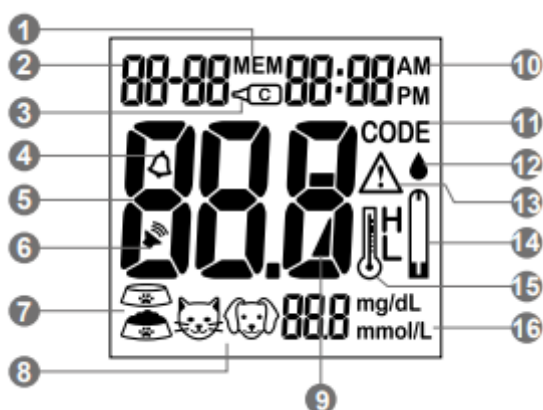


8. De gewenste diersoort selecteren alvorens een bloedglucosetest uit te voeren.
9. Batterij-pictogram. Verschijnt wanneer de batterij bijna leeg is.
10. Tijd
11. Code. Geeft stripcode aan.
12. Bloeddruppel-pictogram. Knippert wanneer het klaar is om bloedmonster op de teststrook aan te brengen.
13. Waarschuwpictogram. Verschijnt wanneer het resultaat buiten het bereik ligt en wanneer de ingestelde referentiewaarde wordt ingesteld.
14. Teststrip-pictogram. Verschijnt wanneer de meter klaar is om te testen.
15. Temperatuurbericht. Verschijnt wanneer de meter het bedrijfstemperatuurbereik heeft overschreden.
16. Meeteenheden. Geeft aan in welke eenheden (mmol/L of mg/dL) de resultaten worden gerapporteerd.

6. Over de gPet PLUS teststrip

De gPet PLUS teststrip wordt gebruikt om de bloedglucosetest uit te voeren in combinatie met de gPet PLUS-meter. Elke strip kan slechts één keer worden gebruikt. De teststrip bestaat uit het volgende:

- **1. Doelgebied:** Gebied waar bloed wordt afgenomen in de teststrip
- **2. Bevestigingsvenster:** Bevestigt dat er voldoende bloed is aangebracht op het doelgebied.
- **3. Contactstrip:** Het uiteinde van de teststrip dat in de testpoort wordt gestoken om de gPet PLUS-meter te activeren. (bovenkant naar boven gericht)

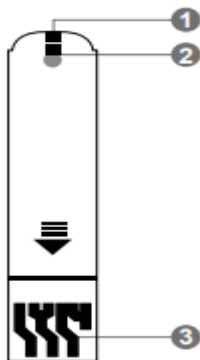

Zie onderstaande link: dierapotheker.nl/g-pet-glucosemeter-25-stuks-strips

7. Over de gPet PLUS teststripflacon

About the gPet PLUS Test Strip Vial

VIAL LABEL

gPet PLUS WOODLEY EQUIPMENT COMPANY LTD.		FOR VETERINARY USE ONLY									
Blood Glucose Test Strips Store in a dry place at 4 - 30°C (39-86°F). Do not refrigerate. Do not store test strips outside this vial. Re-cap immediately. WARNING: Always close lid tightly. For testing of glucose in capillary and venous whole blood. Not for human use.		Date opened..... Use gPet meter only! Lot#: H817E15705 EXP: NOV. 2017									
Woodley Equipment Company Ltd One Station Park Buildings, St Johns Street, Norwich, Norfolk, NR1 7NY, UK Tel: +44 (0) 1204 886622 Fax: +44 (0) 1204 886624 www.woodleyequipment.com Use within 90 days after first opening.		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CAT</th> <th>DOG</th> <th>HORSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CODE</td> <td>789</td> <td>567</td> <td>136</td> </tr> </tbody> </table>			CAT	DOG	HORSE	CODE	789	567	136
	CAT	DOG	HORSE								
CODE	789	567	136								
25 Test Strips		Control Solution Range CAT: 7.6-11.0 mmol/L 137-197 mg/dL DOG: 8.9-12.3 mmol/L 161-221 mg/dL HORSE: 7.5-10.9 mmol/L 136-196 mg/dL									

TEST STRIP VIAL

VETERINARY USE ONLY		
Lot#: H817E15705 EXP: NOV. 2017		
CAT	DOG	HORSE
789	567	136
Control Range 7.6-11.0 mmol/L 137-197 mg/dL 8.9-12.3 mmol/L 161-221 mg/dL 7.5-10.9 mmol/L 136-196 mg/dL		


8. De batterij installeren/vervangen



Als de batterij bijna leeg is, geeft de gPet PLUS-meter een waarschuwingssignaal. Wanneer dit signaal verschijnt, moeten de batterijen worden vervangen. Als het waarschuwingssignaal voor lege batterijen wordt weergegeven, zal de meter nog ongeveer 10 keer nauwkeurige resultaten geven.

9. De batterij vervangen

1. Vanaf de achterkant van de meter, schuif en verwijder voorzichtig het batterijdeksel (**Fig.1**).
2. Plaats de batterijen met de + en - uiteinden overeenkomstig de markeringen in het batterij deksel.
3. Schuif het batterijdeksel terug op zijn plaats. De gPet PLUS meter gebruikt 2 x AAA batterijen.

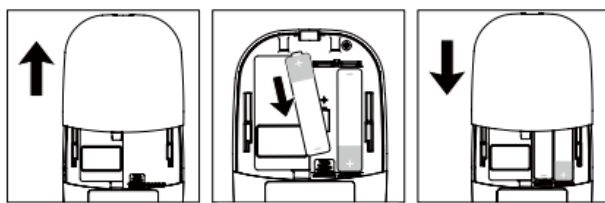

10. De gPet PLUS-meter instellen

Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst, de standaard datum is ingesteld op 1 januari, 00:00. Volg de procedure voor het instellen van de tijd om de datum en tijd.

Jaar, datum en tijd instellen:

1. Wanneer de meter is uitgeschakeld, druk en houd de knop gedurende 4 seconden ingedrukt om deze modus te openen.
2. Druk op ^ of V om "24hr" of "12hr" instelling te kiezen. 3. Druk op om in te stellen (**Fig.2**)
3. De jaartekst verschijnt nu en knippert. Druk op ^ of v om het jaar te kiezen. Druk op (M) om in te stellen (**Fig.3**)


4. Het getal in de tekstpositie van de maand knippert nu. Druk ^ op v of om de maand te selecteren. Druk op (M) om in te stellen (**Fig.4**).

5. De datumtekst gaat nu knipperen. Druk op ^ of v om de datum te selecteren. Druk op (M) om in te stellen (**Fig.5**).

6. Het getal op de positie van de urentekst knippert nu. Druk op ^ of v om het uur te selecteren. Druk op (M) om in te stellen (**Fig.6**).

7. De minuut tekst zal nu knipperen. Druk op ^ of v om de minuut te selecteren. Druk op (M) om in te stellen (**Fig.7**). De ingestelde datum en tijd verschijnen op het LCD scherm (**Fig.8**),


(**Fig.9**). Druk op (M) om de meter uit te schakelen. Het jaar/de datum/de tijd van de meter is nu ingesteld.

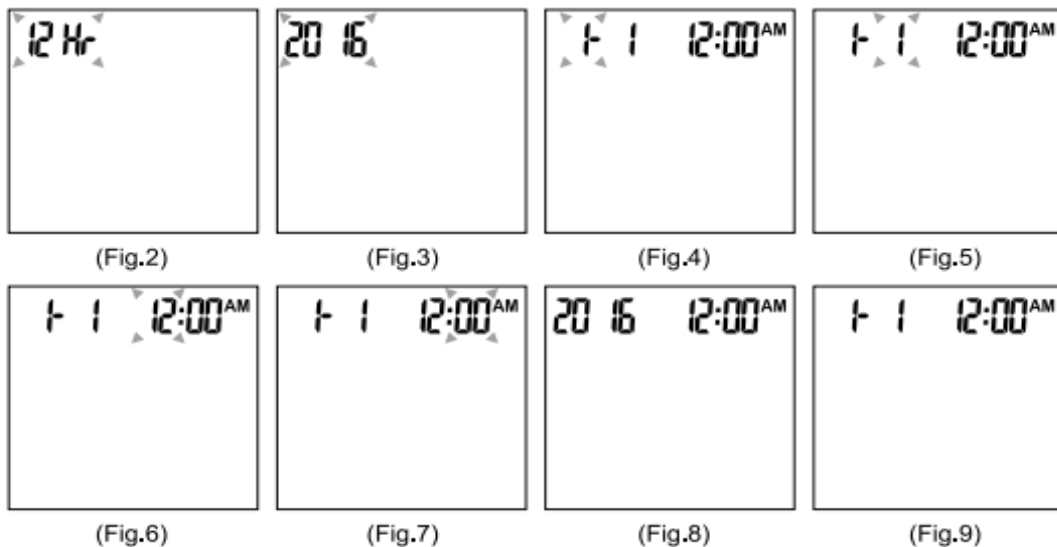


12. De meter coderen

Voer de codestrook in en selecteer de gewenste soort (**Fig.10**)

1. De meter wordt automatisch ingeschakeld wanneer de codestrook wordt ingevoerd (**Fig.11**)

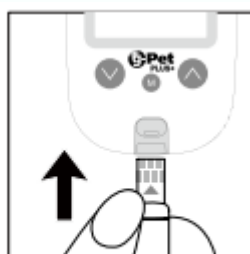


(Fig.10)

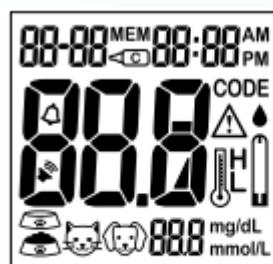


(Fig.11)

2. Het scherm toont de soortselectiemodus wanneer de codestrook wordt ingevoerd. Druk op ^ of v om de gewenste diersoort te selecteren (**Fig.12**)

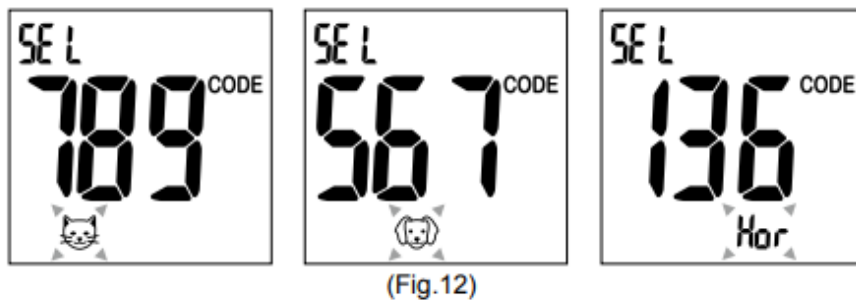

3. Controleer na het selecteren van een dier of het codenummer hetzelfde is als het codenummer dat op het strooklabel is afgedrukt, druk dan op (M) om de selectie te voltooien en het dierpictogram stopt met knipperen (**Fig.13**)


4. Druk op om de meter uit te schakelen

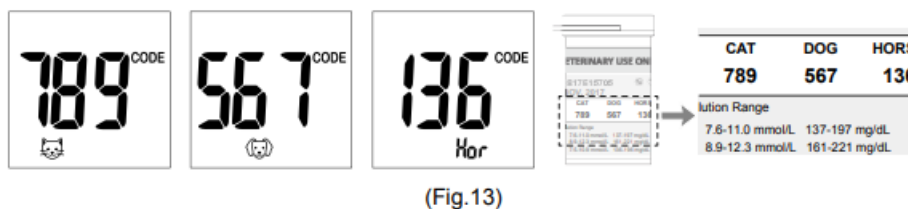

13. Het herinneringsalarm instellen

gPet PLUS veterinaire glucosemeter biedt 4 herinnering alarmen voor elk dier. om over te schakelen naar een andere diersoort, plaatst u de codestrook en selecteert u de gewenste diersoort. Het herinneringsalarm is standaard uitgeschakeld. Volg deze stappen om een herinneringsalarm in te stellen.


1. Wanneer de meter is uitgeschakeld, druk en houd de knop ^ gedurende 4 seconden ingedrukt om deze modus.
2. Het eerste herinneringsalarm verschijnt op het display. (**Fig.14**)
3. Druk op ^ of v om "ON" of "OFF" te selecteren. Als "OFF" wordt gekozen en ingedrukt, gaat de meter naar de volgende herinneringsalarm instellingsmodus. Als "ON" wordt gekozen (**Fig.15**), druk op (M) om te bevestigen en de tijd zal verschijnen
4. Het getal in de uurstand (**Fig.16**) gaat nu knipperen. Druk op ^ of v om uur te kiezen. Druk op (M) om in te stellen.
5. De minuten gaan nu knipperen (**Fig.17**). Druk op ^ of v om de minuten te selecteren. Druk op (M) om in te stellen en de meter gaat naar de volgende instelling van het herinneringsalarm.
6. Herhaal stappen 3 tot 5 om de volgende drie herinneringsalarmen in te stellen.

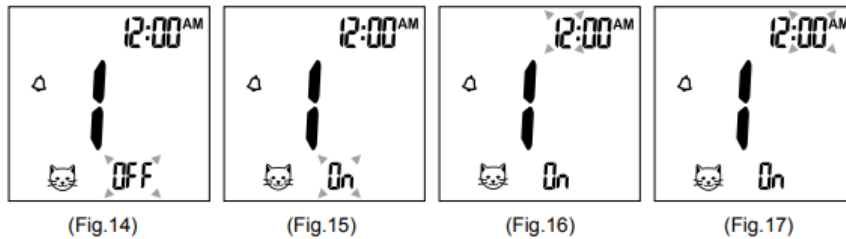

14. Het HI / LO alarm instellen

gPet PLUS veterinaire glucosemeter biedt een individueel HI/LO alarm voor elke diersoort. Om over te schakelen naar een andere diersoort, plaatst u de codestroom en selecteert u de gewenste diersoort.

7. Nadat de instelling van het herinneringsalarm is voltooid, drukt u op (M) om naar de HI alarm instelling
8. Druk op ^ of v om "ON" in te stellen, druk op (M) om te bevestigen. Als u "OFF" kiest, zal de meter deze instelling overslaan (**Fig. 18, 19**).
9. Om de alarminstelling te wijzigen, drukt u op of totdat u de gewenste HI instelling bereikt en druk dan op om te bevestigen. (**Fig. 20**) Het bereik van het HI-alarm is 5,5-22,0mmol/L (100-400mg/dL), standaard is 9,5mmol/L (180mg/dL)
10. Ga verder met het instellen van het LO-alarm (**Fig. 21**) Herhaal stap 8 en 9 (**Fig. 22, 23**) om de LO alarminstelling te bevestigen of te wijzigen. Druk op om de meter uit te schakelen. De LO alarmwaarde bereik is 2.0-5.0mmol/L (40-90mg/dL), standaard is 3.2mmol/L (70mg/dL)
11. Nadat u op hebt gedrukt om het instellen van het niveau te beëindigen, zal de meter uitschakelen.

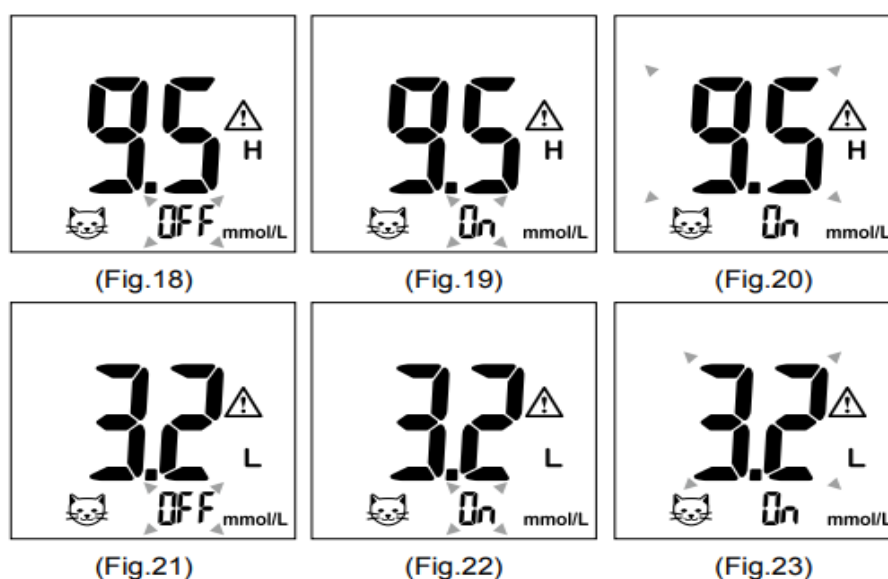

15. Belangrijke informatie

Informatie vóór het testen:

Bewaar de teststrips altijd in de originele flacon. Sluit de flacon onmiddellijk na het verwijderen van een teststrip. Vervang de codestrook telkens wanneer u een nieuwe flacon met teststroken gaat gebruiken.

Gebruik elke strip onmiddellijk nadat u deze uit de flacon heeft gehaald. **Elke teststrip mag slechts eenmaal worden gebruikt.**

Gebruik geen teststrips of kwaliteitscontrole vloeistof na de op de verpakking op de verpakking, omdat dit tot onnauwkeurige resultaten kan leiden.

Bewaar uw teststrips en meter op een koele, droge plaats tussen 4 °C en 30 °C.

Temperaturen buiten het vereiste bereik, evenals vochtigheid, kunnen de teststrips beschadigen en leiden tot onnauwkeurige resultaten.

Elke verandering of toediening van medicatie op basis van de gPet PLUS veterinaire glucosemeter zonder de toestemming en het advies van een arts, wordt afgeraden.

Deel nooit een prikapparaat of lancet met een ander dier.

Alleen gPet PLUS teststrips en kwaliteitscontrole vloeistof kunnen met deze meter worden gebruikt.

16. Bloedglucosetests


Voor het testen van de bloedglucose hebt u het volgende nodig:

1. gPet PLUS meter
2. gPet PLUS-strip
3. Verstelbaar automatisch prikapparaat en steriele lancet, OF insulinespuit met naald.

Vorbereiding van de teststrook:

1. Trek een gPet PLUS-teststrip uit de flacon en sluit de flacon onmiddellijk weer af.
2. Plaats de gPet PLUS-teststrip met de bovenkant naar boven in de testpoort. De meter gaat automatisch aan.

De meter onthoudt het eerder geselecteerde dier en het codenummer wordt weergegeven. (Fig.24)

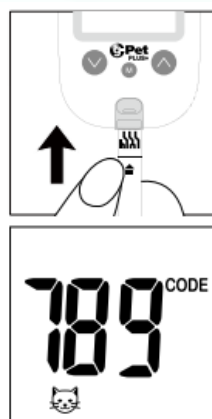

(Fig.24)

Opmerking: Als u de meter voor de eerste keer gebruikt zonder de codestrip plaatst, verschijnt er een "000" op het scherm en schakelt dan automatisch uit na 2 minuten. U mag niet verder testen zonder de meter eerst te coderen. (**Fig.25**)




(Fig.25)

Herinnering:

Controleer of het codenummer op het scherm overeenkomt met het codenummer op de teststripflacon. Als het codenummer op het scherm niet overeenkomt met het codenummer op de teststripflacon, codeer de meter dan met de nieuwe codestrip die bij de teststrips wordt geleverd. Steek de codestrip in de meter totdat de nieuwe code op het scherm verschijnt. Deze moet overeenkomen met de code op de stripflacon.

3. Er klinkt een pieptoon en er verschijnt een codenummer, gevolgd door een knipperend "Druppel" pictogram. U kunt op ^ of v drukken om de maaltijdindicator te selecteren voor het markeren van de test

4. Er kan nu een bloedmonster worden afgenomen.

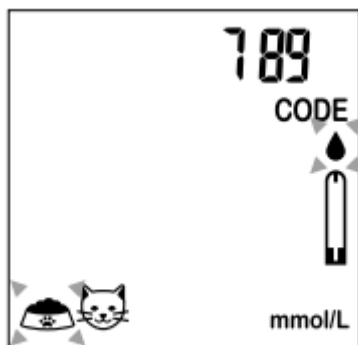

17. Een bloedmonster verkrijgen

Zie voor verdere instructies de bijsluiter bij het prikapparaat.

- 1.** Schroef de dop van het prikapparaat los.
- 2.** Plaats het lancet in het prikapparaat.
- 3.** Draai en trek aan het beschermende lancetkapje om de steriele naaldpunt bloot te leggen.
- 4.** Schroef de dop van het prikapparaat erop. Selecteer de huidpenetratiediepte van ondiep tot diepst.

5. Trek de loop terug tot u een 'klik'-geluid hoort.
6. Plaats het prikapparaat zachtjes tegen de poot of de marginale oorader van het dier. Druk op de trekker om een bloeddruppel te verkrijgen.

Om het prikapparaat te ontladen:

1. Verwijder na het prikken voorzichtig het dopje met het gebruikte lancet.
2. Verwijder het lancet van het prikapparaat en gooi het weg in een container voor klinisch afval.


LET OP: Om de kans op infectie te verkleinen:

1. Gebruik altijd een nieuw en steriel lancet. Lancetten zijn voor eenmalig gebruik.
2. Was uw handen grondig met water en zeep na het hanteren van de meter, prikapparaat of teststrips.
3. Raadpleeg het hoofdstuk "Reinigings- en desinfectieprocedure" voor het reinigen / desinfecteren van de meter en de prikhelp.

18. Bloedmonster aanbrengen op de gPet PLUS teststrip

1. Nadat u een bloedmonster hebt genomen, gooit u de eerste druppel bloed weg om besmetting te voorkomen en vervolgens de punt van de teststrip op de bloeddruppel aan te raken. Het bloed loopt automatisch in de teststrip. Houd het uiteinde van de teststrip tegen de bloeddruppel totdat de meter een pieptoon geeft.
2. Zodra het bloed het bevestigingsvenster van de teststrip volledig heeft gevuld begint de meter af te tellen. Het bloedglucoseresultaat verschijnt in het scherm en wordt automatisch opgeslagen in het geheugen van de meter. Gooi de teststrip weg in de container voor klinisch afval.

Opmerking: Voor nauwkeurige resultaten moet u ervoor zorgen dat het bevestigingsvenster van de teststrip volledig gevuld is met bloed. (Fig.26)

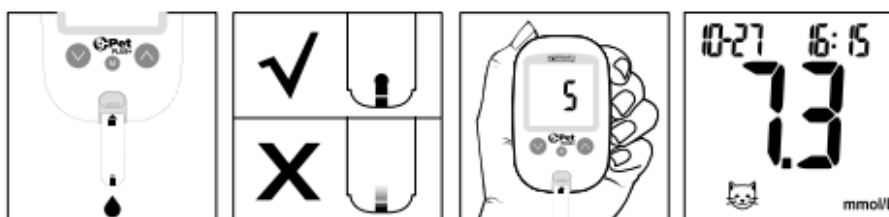


(Fig.26)

3. Nadat het testresultaat verschijnt en als er geen verdere tests worden uitgevoerd schakelt de meter automatisch uit na 2 minuten. Na afloop van de test kunt u de strip uitwerpknop of een tissue worden gebruikt om de teststrip uit de meter te verwijderen.

Waarschuwing:

Gooi de gebruikte teststrip altijd weg in een geschikte container voor klinisch afval. Richt de teststrip NIET op mensen of dieren bij het uitwerpen. **(Fig.27)**

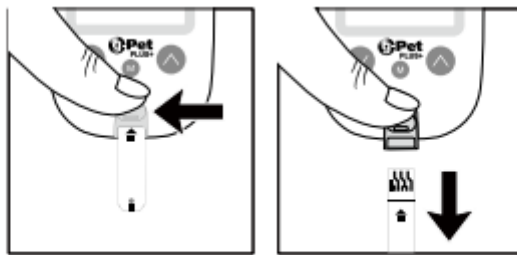

(Fig.27)


LET OP:

Gebruikte lancetten en teststrips worden beschouwd als biologisch gevaarlijk. Gooi gebruikte lancetten en teststrips in een geschikte container voor klinisch afval. Normale bloedglucosewaarden variëren van 4,4 – 6,6 mmol/L (79 – 119 mg/dL) afhankelijk van de diersoort. Diabetische dieren kunnen bloedglucosewaarden hebben die matig verhoogd zijn.

19. HI en LO metingen

1. De gPet PLUS-meter is ontworpen om testresultaten tussen 1,1 – 33,3 mmol/L (20 – 600 mg/dL). Als de melding "HI" (**Fig.28**) op het display verschijnt heeft de meter vastgesteld dat het bloedglucosegehalte hoger is dan 33,3 mmol/L (600 mg/dL). Er wordt voorgesteld de testprocedure te herhalen met een nieuwe teststrip om het resultaat te bevestigen.

2. Als het bericht "LO" (**Fig.29**) op het display verschijnt, heeft de meter gedetecteerd dat het bloedglucosegehalte lager is dan 1,1 mmol/L (20 mg/dL). Er wordt aangeraden de testprocedure te herhalen met een nieuwe teststrip om het resultaat te bevestigen.

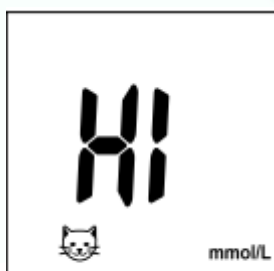

(Fig.28)



(Fig.29)

20. Oplossing voor kwaliteitscontrole

De kwaliteitscontrole wordt gebruikt om te controleren en te garanderen dat de gPet PLUS glucosemeter goed werkt en dat de gebruiker de test correct uitvoert.


Wanneer een test van de kwaliteitscontroleoplossing uitvoeren?

1. Bij het eerste gebruik van de gPet PLUS glucosemeter.
2. Bij gebruik van een nieuw flesje gPet PLUS teststrips.
3. Telkens wanneer de werking van het systeem in twijfel wordt getrokken, of op regelmatige basis om de nauwkeurigheid te waarborgen, bijvoorbeeld eenmaal per week.
4. Wanneer het resultaat van de bloedglucosetest onverwacht lager of hoger is dan de normale waarden.


Opmerking: Lees voor meer informatie over de kwaliteitscontroleoplossing de bijsluiter van de oplossing voor kwaliteitscontrole.

21. Een kwaliteitscontroletest uitvoeren


1. Codeer de meter
2. Zorg ervoor dat de kwaliteitscontroleoplossing op kamertemperatuur is 15°C - 35°C (59°F - 95°F) voor de test.
3. Plaats een gPet PLUS-teststrip met de bovenkant naar boven en het uiteinde van het contactstaafje eerst in de testopening. De meter wordt automatisch ingeschakeld. **(Fig.30)**
4. Alle segmenten van het LCD-scherm verschijnen, er klinkt een pieptoon en het codenummer verschijnt, gevolgd door een knipperend "Druppel" pictogram **(Fig.31)**. Controleer of het codenummer op het scherm overeenkomt met het codenummer op het flesje teststrips.
5. Houd de (M) knop 2 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de testmodus voor de controlevloeistof modus, "(c)" verschijnt op het display. Als de knop nogmaals gedurende 2 seconden wordt ingedrukt, keert de meter terug naar de normale bloedtestmodus.
6. Gooi de eerste druppel controlevloeistof weg en knijp een kleine druppel controlevloeistof uit op een schoon, niet-absorberend oppervlak (zoals een schoon stuk was). Breng de kwaliteitscontrolevloeistof niet rechtstreeks uit het flesje op de teststrook aan, want dan kan er verontreiniging kan optreden. **(Fig.32)**
7. Steek de punt van de teststrip lichtjes in de druppel kwaliteitscontrolevloeistof. De controlevloeistof wordt automatisch in de strip gezogen. Houd vast totdat de meter piept. De meter begint nu af te tellen en het testresultaat van de kwaliteitscontroleoplossing verschijnt op het LCD-scherm. **(Fig.33)**

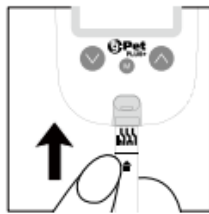

(Fig.30)

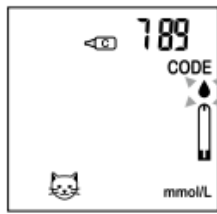

(Fig.31)

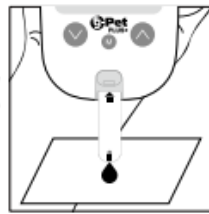

(Fig.32)



(Fig.33)

LET OP: Volg de bovenstaande instructies bij het uitvoeren van de test met de kwaliteitscontroleoplossing om besmetting te voorkomen.

22. Resultaten kwaliteitscontroleoplossing

De gPet PLUS-meter werkt correct als het controleresultaat binnen het gespecificeerde doelbereik valt dat op de teststripflacon staat afgedrukt. Als het testresultaat buiten het doelbereik valt, herhaalt u de test.

Resultaten die buiten het gespecificeerde doelbereik vallen, kunnen worden veroorzaakt door:

- Fout bij het uitvoeren van de test
- Temperatuur van de oplossing voor kwaliteitscontrole is lager dan 15°C (59°F) of hoger dan 35°C (95°F)
- Verlopen of verontreinigde oplossing voor kwaliteitscontrole
- Verlopen of verontreinigde teststrips
- Storing van de meter

Opmerking: Het resultaat wordt niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde als de gPet PLUS meter is ingesteld op de testmodus voor de kwaliteitscontroleoplossing. Gebruik de gPet PLUS meter NIET als het probleem aanhoudt. Neem contact op met de klantenservice.

23. Geheugenfuncties


De in het geheugen opgeslagen resultaten bekijken

1. Druk op (M) om de meter in te schakelen en ga naar de selectiemodus voor diersoorten met behulp van het knipperend pictogram, druk op ^ of v om de gewenste diersoort te selecteren. (Fig.34)



(Fig.34)

2. Nadat u de gewenste soort hebt geselecteerd, drukt u op $\square$ om te bevestigen.
 3. Druk op $\square$ om eerdere resultaten te bekijken. In eerste instantie verschijnt het Jaar in de linkerbovenhoek (**Fig.35**). Het symbool "MEM" verschijnt in het centrale gedeelte bovenaan. Na 1 seconde verschijnt Maand-Dag in de linkerhoek en Tijd in de rechterbovenhoek. (**Fig.36**). De meest recente geheugenresultaten worden als eerste weergegeven.
 4. U kunt op $\square$ of $\square$ drukken om vooruit of achteruit door de resultaten te bladeren.
 5. Druk op de (M) knop om de diersoort te verlaten en de testresultaten van de kwaliteitscontrole vloeistof te bekijken (**Fig.37**).
 6. Wanneer de meter het laatste testresultaat weergeeft, drukt u op de $\square$ knop zodat de gPet PLUS meter het gemiddelde dagresultaat weergeeft (**Fig.38**).
- Opmerking: De meter slaat 500 resultaten op in het geheugen. Wanneer het geheugen vol is, wordt het oudste resultaat verwijderd en vervangen door het meest recente resultaat.

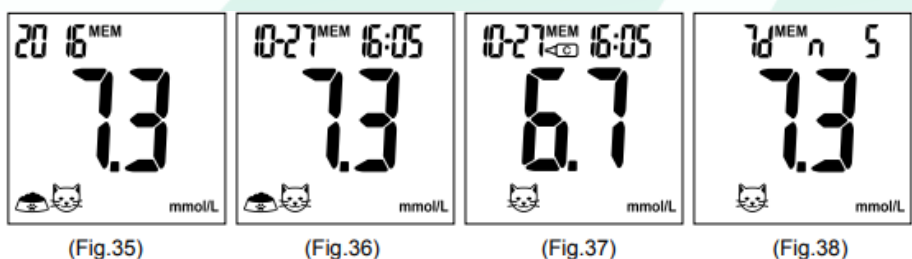


24. Gemiddelde dagresultaten bekijken

1. Druk op (M) om de meter in te schakelen en selecteer de gewenste diersoort en druk vervolgens op $\square$ om de gemiddelde resultaten te bekijken.
2. De 7-daagse, 14-daagse en 30-daagse gemiddelde resultaten gemarkeerd met geen maaltijd/ voor de maaltijd/ na de maaltijd worden achtereenvolgens op het scherm weergegeven wanneer u de $\square$ knop indrukt en loslaat (**Fig. 38-46**).
3. Wanneer de meter 7 dagen zonder maaltijdstatus weergeeft druk op de $\square$ knop en de meter verandert dan naar de opgeslagen testresultaten.

Let op:

1. Het opeenvolgende gemiddelde over 7/14/30 dagen wordt berekend op basis van de bloedglucoseresultaten verkregen gedurende de laatste opeenvolgende periodes van 7/14/30 dagen.
2. Een resultaat met een symbool geeft aan dat de meting buiten het en mogelijk niet nauwkeurig is. Deze waarde wordt uitgesloten van de 7, 14 en 30 daagse gemiddelden.
3. LO onder 1,1mmol/L (20 mg/dL) en HI metingen boven 33,3mmol/L (600 mg/dL) worden niet in het geheugen opgeslagen.

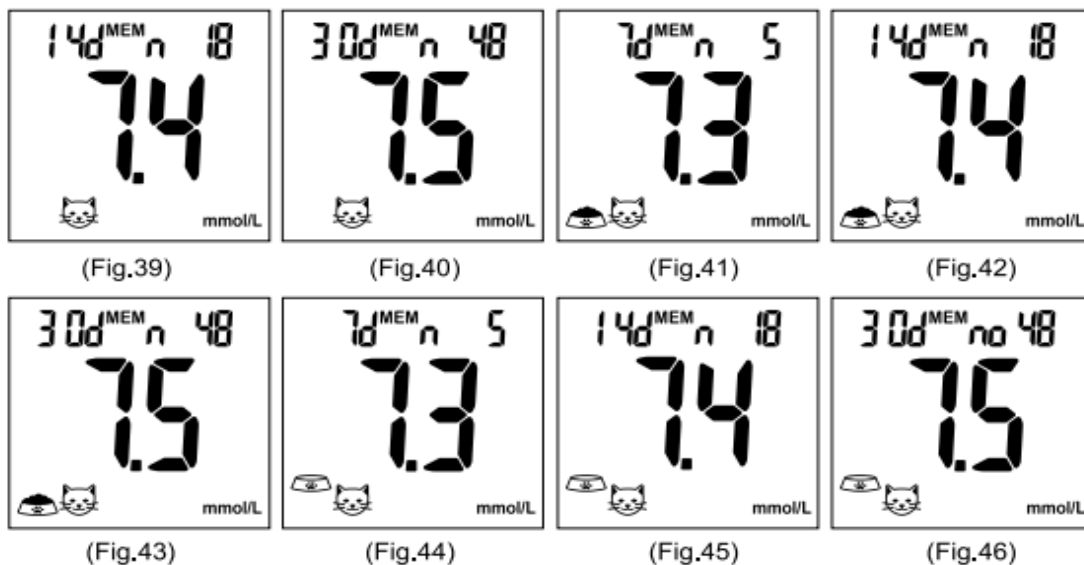

25. De geheugenmodus verlaten

1. Wanneer de meter het testresultaat van de kwaliteitscontroleoplossing weergeeft, druk op (M) om de meter uit te schakelen.
2. De meter schakelt ook automatisch uit na 2 minuten na de laatste toetsdruk.

26. Procedure voor reiniging en desinfectie

Algemeen schoonmaken:

Schakel de meter uit. Gebruik een zachte doek bevochtigd met water of een mild reinigingsmiddel om de voorkant van de meter voorzichtig af te vegen;
Vermijd het gebruik van alcohol of organische oplosmiddelen.
Dompel de meter bij het schoonmaken niet onder in water. Laat geen water of reinigingsvloeistoffen in de meter, teststripgleuf of connector.

27. Verzorging en opslag

1. Ga voorzichtig om met de gPet PLUS-meter. Het laten vallen of gooien van de meter kan schade aan het apparaat veroorzaken.
2. Stel de meter, de teststrips of de kwaliteitscontrole vloeistof niet bloot aan extreme omstandigheden zoals hoge vochtigheid, hitte, vrieskou of stof.
3. De gPet PLUS-meter moet bij kamertemperatuur in een droge en schone ruimte worden bewaard.

NIET BEWAREN IN DIRECT ZONLICHT OF OP PLAATSEN MET EEN HOGE VOCHTIGHEID EN/OF STOF. Het wordt aanbevolen dat u de meter en zijn accessoires opbergt in de meegeleverde draagtas. meegeleverde draagtas.

28. Displayberichten

DISPLAY	WHAT IT MEANS	ACTION
	The system is ready to accept a blood sample.	Apply a blood sample.
	This message is displayed if your gPet PLUS meter has not been coded.	Code the meter. Please refer to page 16.
	Δ_H appears when the result is HIGHER than the "HI alarm setting" reference range.	For reference, or the default setting value can be changed 10.0 mmol/L (180 mg/dL) according to page 21.

DISPLAY	WHAT IT MEANS	ACTION
	Δ_L appears when the result is LOWER than the "LO alarm setting" reference range	For reference, or the default setting value can be changed 3.9 mmol/L (70 mg/dL) according to page 21.
	Test result is higher than 33.3 mmol/L (600 mg/dL).	Repeat the test using a new test strip. If the same message is displayed then the result will be higher than the meter operating range.
	Test result is lower than 1.1 mmol/L (20 mg/dL).	Repeat the test using a new test strip. If the same message is displayed then the result will be lower than the meter operating range.

DISPLAY	WHAT IT MEANS	ACTION
	Temperature is high during the test procedure.	Large variation may occur between results due to high or low temperature. Move to the environment (10°C - 40°C or 50°F - 104°F) and wait 30 minutes before re-testing.
	Temperature is low during the test procedure.	
	The preset alarm is ringing to remind it is time to perform blood glucose test.	Press any button to shut off or the alarm will turn off automatically after 30 sec.





DISPLAY	WHAT IT MEANS	ACTION
	Battery power is low. Meter will provide approximately 10 more measurements.	Replace with two AAA batteries.

29. Foutmeldingen

Error Messages

DISPLAY	WHAT IT MEANS	ACTION
	Quality control solution temperature is higher than permitted for analysis.	Move to the environment (15°C - 35°C or 59°F - 95°F) and wait 30 minutes before re-testing.
	Quality control solution temperature is lower than permitted for analysis.	
	Temperature is too high to perform the test.	Repeat the test in a cooler setting (10°C - 40°C or 50°F - 104°F). Wait 30 minutes before re-testing.

DISPLAY	WHAT IT MEANS	ACTION
	Temperature is too low to perform the test.	Repeat the test in a warmer setting (10°C - 40°C or 50°F - 104°F). Wait 30 minutes before re-testing.
	Battery power is too low for further usage.	Replace with two AAA batteries immediately.
	An error message indicating a problem with the coding of meter.	Code the meter again. If the problem persists, contact customer service.

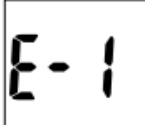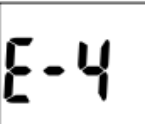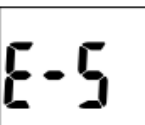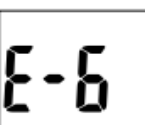DISPLAY	WHAT IT MEANS	ACTION
	An error message indicating a problem with the test strip.	Review the instructions and try again with a new test strip.
	An error message indicating a problem with the test strip or meter.	Review the instructions and try again with a new test strip. If the problem persists, contact customer service.
	An error message indicating a problem with the meter.	Please remove the battery and wait for 1 minute, then reinstall the battery to see if meter is working properly. If the problem persists, contact customer service.
DISPLAY	WHAT IT MEANS	ACTION
	An error message indicating a problem with the test strip.	Review the instructions and try again with a new test strip.
	An error message indicating a problem with the meter.	Please remove the battery and wait for 1 minute, then reinstall the battery to see if meter is working properly. If the problem persists, contact customer service.
	An error message indicating a problem with the test strip.	Review the instructions and try again with a new test strip. If the problem persists, contact customer service.

30. Problemen oplossen

Trouble Shooting

Other problems that may occur	ACTION
The gPet PLUS test strip has not been inserted into the meter properly.	Review the instructions and re-insert the test strip correctly.
Defective gPet PLUS test strip.	Replace with a new gPet PLUS test strip.
Test strip remains in the test port for more than 2 minutes prior to testing.	Meter will automatically turn-off. Re-insert the test strip into the test port.
LCD display on the meter is blank when trying to perform a test.	Contact Woodley Equipment Company Ltd customer services for help. Tel: +44 (0) 1204 669033 Fax: +44 (0) 1204 669034
If the meter does not function after new batteries are installed	Please remove the batteries and wait for 1 minute, then reinstall the batteries to see if meter works correctly.

31. Specificaties

Specifications

Working Temperature	10°C - 40°C(50°F - 104°F)
Humidity	10 - 90% RH
Haematocrit	20 - 60%
Test Sample	Venous and Capillary Whole Blood
Sample Volume	0.7 µl
Measuring Unit	mmol/L or mg/dL meters available
Measuring Range	1.1 - 33.3 mmol/L (20 - 600 mg/dL)
Test Time	5 seconds
Memory Capacity	500 most recent results
Average	7/14/30 days average results
External Output	USB interface
Power supply	two AAA batteries
Battery Life	Approximately 1000 tests
Dimension	106L x 66W x 20H mm
Weight	65 g without battery

32. Bewaaradvies

Bewaren bij temperatuur -20°C - 50°C (-4°F - 122 °F), Minder dan 90% RH

33. Beschrijving van pictogrammen

	Do not reuse
	Use by
	Batch Code
	Caution
	Manufacturer
	Do not use if package is damaged
	Temperature limitation
	Consult instructions for use
	Keep away from sunlight
	Keep dry
	Control



gPet PLUS Meter, gPet PLUS teststrips en kwaliteitscontrole vloeistof zijn in overeenstemming met de fabrikant.

Woodley Equipment Company Ltd

Old Station Park Buildings, St Johns Street,
Horwich,
Bolton,
Lancashire, BL6 7NY,
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1204 669033

34. Service en garantie

BELANGRIJK:

Woodley Equipment Company Ltd. kan de prestaties van de gPet PLUS glucosemeter wanneer deze gebruikt wordt met andere teststrips dan die ontworpen zijn voor de gPet PLUS meter niet garanderen. De gPet PLUS glucosemeter fabrieksgarantie is alleen geldig bij correct gebruik binnen de richtlijnen van de meegeleverde gebruikershandleiding en vervalt wanneer gPet PLUS meter en gPet PLUS teststrips teststrips onjuist worden gebruikt.

Woodley Equipment Company Ltd. biedt een levenslange garantie op dit product. Ons bedrijf zal elke gPet PLUS meter die defect wordt bevonden repareren of vervangen door een nieuwe gPet PLUS meter. Deze garantie is niet van toepassing op de prestaties van een gPet PLUS meter die per ongeluk beschadigd, gewijzigd, verkeerd gebruikt, geknoeid of op enigerlei wijze misbruikt is.

In geen geval zal ons bedrijf aansprakelijk zijn tegenover de koper of enige andere persoon voor incidentele schade, gevolgschade of bestraffende schade voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met de aankoop of het gebruik van de gPet PLUS meter of zijn onderdelen.

Voor garantiediensten van de fabrikant moet de koper contact opnemen met de plaatselijke leverancier voor hulp.

Customer Service

Woodley Equipment Company Ltd., Old Station Park Buildings, St Johns Street,
Horwich, Bolton, Lancashire, BL6 7NY, UK Tel: +44 (0) 1204 669033
www.woodleyequipment.com or E-mail us at: sales@woodleyequipment.com

Als u de klantenservice belt, houd dan uw gPet PLUS-meter, gPet PLUS teststrips en alle andere systeembenodigdheden bij de hand. Zo kunnen uw vragen snel en efficiënt beantwoorden.





WOODLEY
EQUIPMENT COMPANY LTD.

OLD STATION PARK BUILDINGS, ST. JOHNS STREET,
HORWICH, BOLTON, LANCASHIRE, BL6 7NY, UK

Tel: +44 (0) 1204 669033

Fax: +44 (0) 1204 669034

Email: sales@woodleyequipment.com

Web: www.woodleyequipment.com



Read Instructions for use



Keep away from sunlight



Caution, consult accompanying documents



Keep dry



Do not reuse



B05D106001(01) Rev. date: 03/2016

